




UROLA KOSTAKO
UDAL ELKARTEA



COVID-19

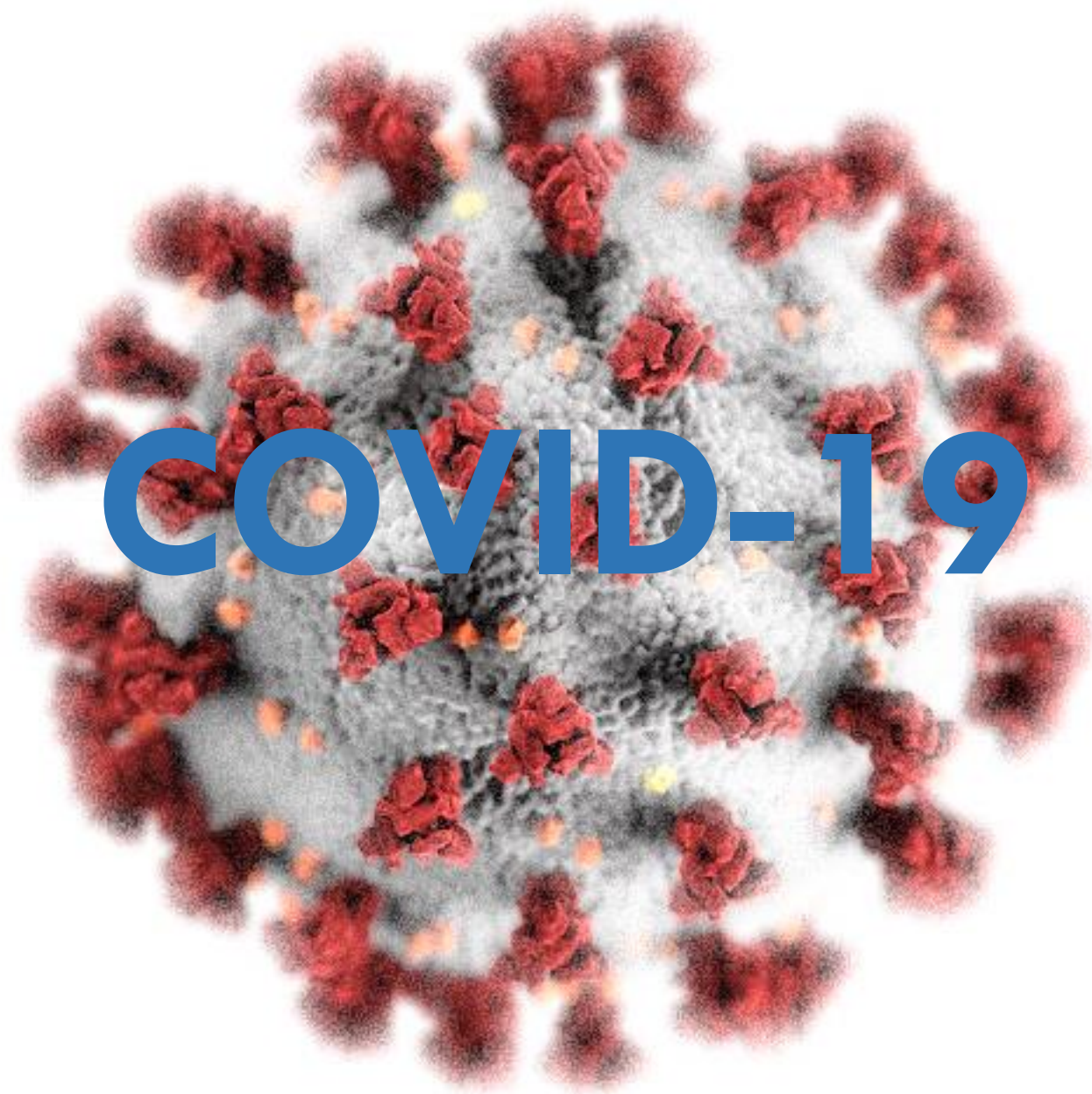

COVID-19

- 1. Saioa: Covid-19. Covid-19 eta bere arriskuak. Arrisku biologikoak. Arriskuak nola ebaluatu eta kontingentzia plana**
- 2. Saioa: Covid-19. Antolaketa neurriak eta neurri espezifikoak nire negozioan.**
- 3. Saioa: Babes ekipamendua: taldekakoa zein banakakoa**

Data : 2020-05-19/20/21



UROLA KOSTAKO
UDAL ELKARTEA

COVID-19

- **Babes ekipamendua: taldekakoa zein banakakoa**

Aurkezpena

Data: 2020-05-19/20/21



UROLA KOSTAKO
UDAL ELKARTEA

Webinar COVID-19

PROIEKTUAREN FITXA

Izenburua

COVID-19: Babes ekipamendua: taldekakoa zein banakakoa

Egile eta kudeatzailea:

Urola Kostako Udal Elkartea (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaiako Udalak)

Diru-laguntza:

Kontratutako aholkularitza-etxea

Tinkatu Aholkularitza

Hizlaria: Eduardo Arana

Garatzeko epea

2020ko Maiatzak 19/20/21



TINKATU
ballabideen ikerkuntza
investigación de recursos



Babes neurriak

Kolektiboa:

- Saihestu edo murriztu ezin izan diren arriskuetatik babesten gaituen teknika da **babes kolektiboa**, eta babes hori jasotzen duten pertsona guztiei eragiten die.

Norbanakoa:

- Langileak (erabiltzaileak) bere segurtasuna edo osasuna arriskuan jar dezakeen arrisku batetik edo batzuetatik babesteko eramaten edo eusten duen edozein ekipo, bai eta helburu horretarako erabiltzen den edozein osagarri ere.





Babes neurri kolektiboak

Orokorrak

- Pertsonak alarma-egoeraren arabera konfinatzea.
- Pertsonen mugikortasuna murriztea.
- Pertsonen arteko distantzia 2 metrokoa izatea.
- Edukiera murriztea, bai establezimenduetan, bai espazio irekietan (hondartzak, igerilekuak, etab.).
- Alarma-egoeran funtzionatzeko legeria edo araudia definitzea. (Adib.: maskarailen erabilera)



Babes neurri kolektiboak

Berezkoak

- Garbiketa- eta desinfekzio-planean zehaztutako eragiketak eta/edo prozesuak.
- Establezimenduetako sarreretarako ilarak eta itxaron-ilarak antolatzea.
- Gure establezimenduen sarreran definitutako harrera- eta/edo arreta-prozesuak.
- Gel hidroalkoholkoa erabilera orokorrerako jartzea.
- Babesteko pantailak edo manparak.



Norbanako babes neurriak

- Arriskuaren eta erabiltzailearen artean azken hesi bat jartzea da norberaren babesaren helburua, erabiltzaileak berak erabili beharreko ekipoen bidez.
- Definizioz, ez du arriskua ezabatzen eta bere prebentzio-funtzioa mugatua da.
- Ahalik eta arreta handiena jarri behar zaio aukera egokiari, bai hesi hori faltsua izan ez dadin, esposizioa areagotuz, bai deserosotasunak saihesteko.




Norbanako babes neurriak

NBEak edo EPIak

- Norbera babesteko ekipamenduek (NBE) ez dituzte arriskuak ezabatzen, eta horiek erabiltzea nekagarria edo deserosoa izaten da askotan erabiltzen dituztenentzat. Horregatik, hobe da haietara jotzeko beharra ahalik eta gehien mugatzea.
- Norbera babesteko ekipamenduak dira pertsonaren eta arriskuaren arteko azken hesia. Ez dute arriskuaren jatorrian eragiten, arriskua jasaten duen pertsonarengan baizik. Ez dituzte arriskuak ezabatzen, ondorioak minimizatu nahi dituzte.
- Norbera babesteko ekipamenduak erabili behar dira, baldin eta arriskuak ezin badira saihestu edo ezin badira behar beste mugatu babes kolektiboko tekniken bidez edo lanaren antolamenduan aldaketak eginez.



Elementos de protección individual

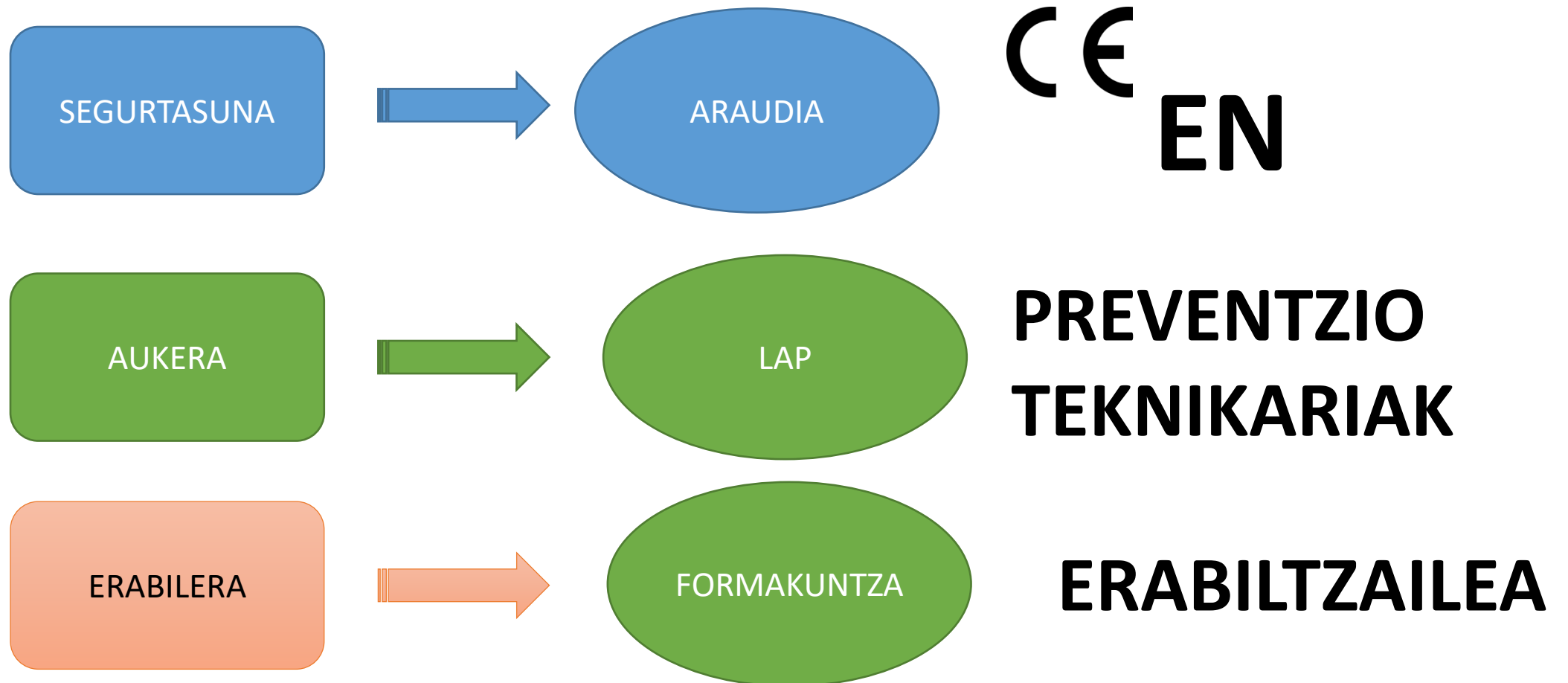



Norberaren babeserako ekipamendua MASCARILLAK

- PARTIKULEN AURKAKO FILTRANTEAK
- MASKARILLA KIRURGIKOAK
- MASKARILLA HIGIENIKOAK
- NBE, Norberaren babeserako ekipoak
- PSa, osasun produktua
- EZ da ez NBEa eta ez PSa



MASCARILLAS

SEGURTASUNA	AUKERA	ERABILGARRITASUNA
<p>Partikulen aurkako berezko filtroa duten maskarillak:</p> <ul style="list-style-type: none">•Araudia: EN 149:2001+A1:2009 <p>NOTA:</p> <p>ARAUDI TXINARRA EUROPAKOAREKIN BAT EGITEN DUENA</p> <p>GB/2026/2006 KN95 (para las FFP2)</p>	<p>FFP2. Eraginkortasun iragazlea:% 94. 2 m-tik beherako kontaktuan dauden pertsonak, kasu probableekin edo baieztatuekin.</p> <p>FFP3. Efikazia iragazlea:% 99. Sintomak dituzten pertsonak, kontzentrazio altuetan aerosolak sor ditzaketenean</p>	<p>Doitzea. Maskararen eta eramailearen aurpegiaren arteko doikuntza ezin hobea izatea maskarak eman dezakeen eraginkortasun iragazle handiena bermatzeko.</p> <ul style="list-style-type: none">• Berrerabiltzea/desinfektatzea. Fabrikatzaile gehienek ez dute bermatzen maskarak garbitzea, desinfektatzea edo esterilizatzea, harik eta ondorioak ebaluatzeko egiten ari diren azterlanak amaitu arte.• Erabiltzeko denbora. Maskara motaren, kutsatzailearen kontzentrazioaren eta erabiltzailearen arnas erritmoaren arabera



MASCARILLAS



KIRURGIKOA



HIGIENIKOA



FFP2 HORIZONTAL (pico-pato)
sin válvula de exhalación


FFP2 VERTICAL
con válvula de exhalación

FFP3 HORIZONTAL (pico-pato)
con válvula de exhalación



UROLA KOSTAKO
UDAL ELKARTEA

Webinar COVID-19

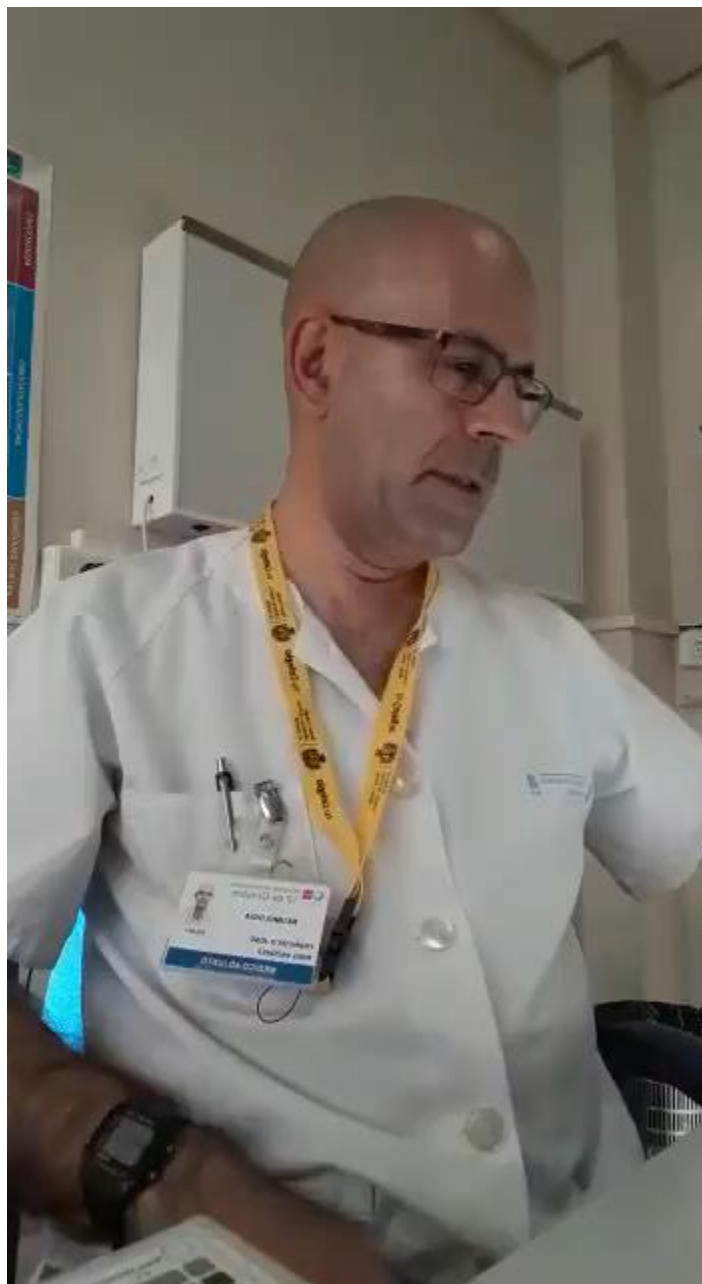



AURPEGIKO MASKARA



Erabiltzailearen begiak, sudurra eta ahoa babesten ditu, ezta, hitz egin edo doministiku egiten duenean aurrez aurre duen pertsona batek atera ditzakeen tantetatik.





Erabiltzaileak bere aurpegia ukitzeaz sahiesten du



Eta maskararen erabiltzailearengandik hurbil dauden gainerako pertsonak babesten ditu, erabiltzaileak bere ahotik atera ditzakeen tantetatik.



ESKULARRUAK

Legislación a cumplir	Reglamento (UE) 2016/425	Los EPI puestos en el mercado a partir del 21 de abril de 2019 deben cumplir con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425. Aún pueden encontrarse en el mercado guantes conformes a la Directiva 89/686/CEE, puestos en el mercado antes del 21/04/19, que pueden comercializarse sin impedimento
Marcado obligatorio		Marcado CE que declara cumplimiento con los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad del Reglamento (UE) 2016/425. Como EPI de categoría III, junto al marcado debe figurar un número de cuatro dígitos que identifica al organismo notificado que hace la evaluación de la conformidad según el módulo C2 o el módulo D, según elección del fabricante.
Marcado según norma		Junto al pictograma se indicará el número de la norma y, para los guantes que presentan resistencia a los virus, se indicará la palabra "VIRUS"



ESKULARRUAK

Tras la publicación de la [Resolución de 23 de abril de 2020](#), se autoriza comercialización de guantes de protección según especificaciones no armonizadas, cumpliendo condiciones

- **Equivalentes a EN ISO 374-5:2016**
- China: GB 2881-20112
- ASTM (EE UU): ASTM D5151 + ASTM F1671

<p>Con marcado CE</p>	<p>Marcado CE + EN ISO 374-5:2016</p> <ul style="list-style-type: none"> •Destinatarios posibles: Toda la población •Normativa a cumplir: EN ISO 374-5:2016 •Documentación asociada al EPI: <ul style="list-style-type: none"> • Certificado UE de Tipo. El fabricante no está obligado a entregarlo con el EPI. Si se solicita y lo entrega, verificar organismo emisor. • Declaración UE de conformidad • Folleto informativo 	<p>Marcado CE + Especificación X</p> <ul style="list-style-type: none"> •Destinatarios posibles: Toda la población. •Normativa a cumplir: según Orden 23 de abril •Documentación asociada al EPI: <ul style="list-style-type: none"> •Certificado UE de Tipo. El fabricante no está obligado a entregarlo con el EPI. Si se solicita y lo entrega, verificar organismo emisor. •Declaración UE de conformidad •Folleto informativo
<p>Sin marcado CE</p>	<p>Marcado según especificación X</p> <ul style="list-style-type: none"> •Destinatarios posibles: Toda la población •Normativa a cumplir: según Orden 23 de abril •Documentación asociada al EPI: <ul style="list-style-type: none"> • Informe de ensayos. El fabricante/importador debe poder demostrar que cumple con las normas declaradas. NO está obligado a presentar informes, pero si lo hace, verificar que el informe de ensayo está emitido por un laboratorio acreditado. • Autorización. La comercialización de estos EPI debe contar con la autorización de una autoridad estatal o autonómica. El fabricante/importador no está obligado a entregarla junto con el EPI, pero es un requisito obligatorio hasta que se obtiene el marcado CE. 	





ESKULARRUAK

SEGURTASUNA	AUKERA	ERABILGARRITASUNA
<p>Mikroorganismoen aurkako babes eskularruak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Araudia: EN ISO 374-5:2016	<ul style="list-style-type: none">• Baldintza hori gainditzen duten eskularruak "birus" hitza erabiliz bereiziko dira, en ISO 374-5 arauak adierazitako piktogramarekin batera.• Erabili eta botatzeko eskularruak erabiltzea trebetasuna behar duten lanetan.• Eskularru lodiagoak, hain trebetasun handia behar ez duten lanetan.	<ul style="list-style-type: none">• Fabrikatzaileak eskularrua berrerabilgarria dela adierazten duenean, garbiketa eta desinfekzioa fabrikatzailearen berariazko jarraibideen arabera egingo da.• Birusen aurrean entseatu ez diren eskularruek bakterioen eta onddoen aurkako babesa baino ez dute erakutsi.

ESKULARRUAK

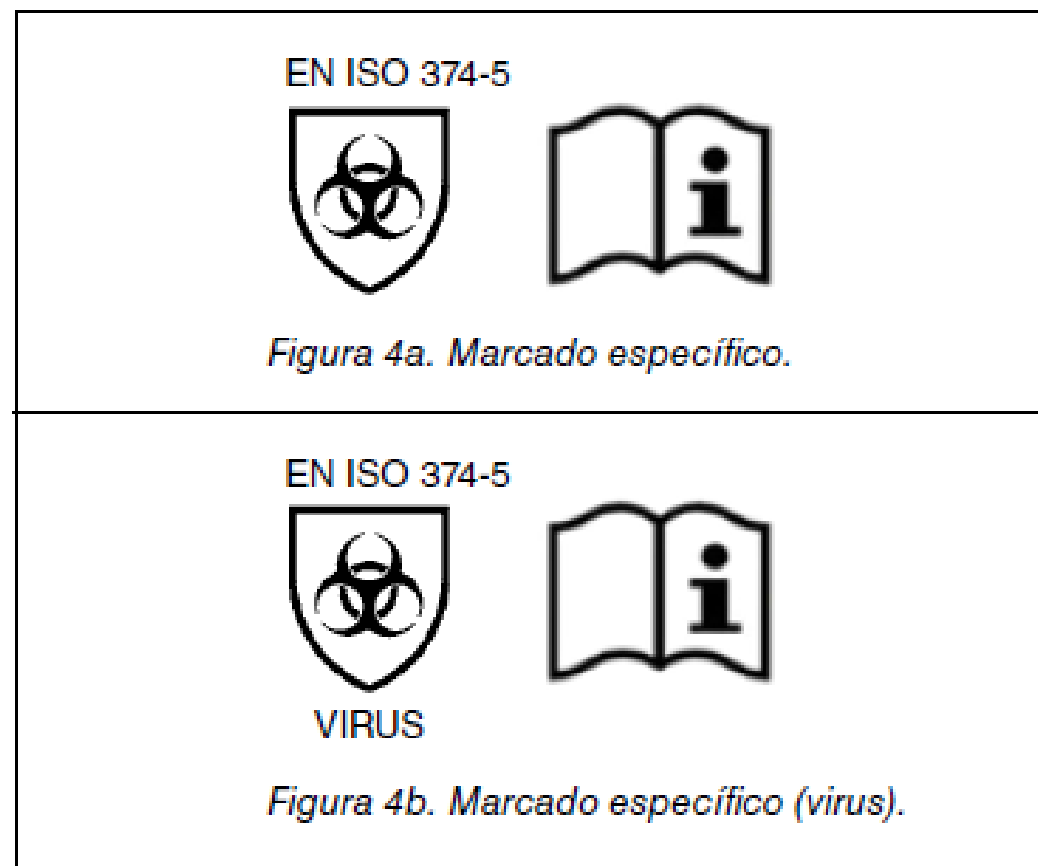


Figura 4. Marcado específico frente a microorganismos.
4a. Bacterias y hongos. 4b. Bacterias, hongos y virus.



UROLA KOSTAKO
UDAL ELKARTEA



Webinar COVID-19



**CORONABIRUSAREN AURKAKO
PREBENTZIOA**



**MESEDEZ, MANTENDU PERTSONEN
ARTEKO DISTANTZIA**



TINKATU
BARRIOETAN ERANTZUN
MANTOLITZEN DU GUREN



**MASKARILLA
ERAMATEA
DERRIGORREZKOA DA**



TINKATU
BARRIOETAN ERANTZUN
MANTOLITZEN DU GUREN

Mila esker

ATSEGINA IZAN DA WEBINAR HAUEK ZUEKIN PARTEKATZEA, ETA ESPERO DUGU TRANSMITITUTAKO INFORMAZIOA BALIAGARRIA IZANGO ZAIZUELA.